

QuickSplint®



Custom-fit Interim Bite Plane

Indications for Use Statement

- Protection of teeth and restorations from injury due to bruxism or clenching.
- Temporary relief of muscle tension, headaches and pain associated with bruxism or clenching.
- Temporary treatment of acute jaw joint and muscle sprain/strain along with the relief of associated headaches and pains.



Orofacial Therapeutics

Distributed by Orofacial Therapeutics, LP.
©2016 Orofacial Therapeutics, LP. QuickSplint® is a registered trademark of Orofacial Therapeutics, LP. All rights reserved. Made in USA

1-619-303-4606 | QuickSplint.com

PN D-3002RevG



See instructions for use
 Ver las instrucciones
 Voir les instructions pour l'utilisation
 Veja as instruções de utilização
 Vedere le istruzioni per l'uso
 Siehe Gebrauchsanweisung
 Zie de instructies voor het gebruik



Date of manufacture
 Fecha de fabricación
 Date de fabrication
 Data de fabrico
 Data di produzione
 Datum der Herstellung
 Datum van fabricage




Manufacture
 Fabricante
 Fabricant
 Fabricante
 Produttore
 Hersteller
 Fabrikant
 Truer Medical, Inc.
 An ISO 13485 Registered Co.
 1050 N. Batavia Ave. Suite C
 Orange, California 92867 USA



Use by
 Su uso per
 Utilisation par les
 Validade
 Da usare entro
 Die Nutzung durch
 Houdbaar to



Batch Code
 Código de lote
 Code de lot
 Código do lote
 Codice lotto
 Batch Code
 Batch Code

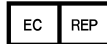

Advena Ltd.
 Pure Offices
 Plato Close,
 Warwick CV34 6WE UK



10° C - 24° C
 50° F - 75° F



EN	Prescriber Instructions	4
ES	Instrucciones para el especialista	8
FR	Instructions du prescripteur	22
PT	Instruções para o médico dentista	16
IT	Istruzioni per il medico prescrivente.....	20
DE	Anweisungen für den Verschreibenden....	24
NL	Instructies voor de voorschrijver.....	28



Orofacial Therapeutics

Distributed by Orofacial Therapeutics, LP.
 ©2016 Orofacial Therapeutics, LP. QuickSplint® is
 a registered trademark of Orofacial Therapeutics,
 LP. All rights reserved. Made in USA
1-619-303-4606 | QuickSplint.com

PN D-3002RevG

To Reorder go to:
QuickSplint.com
 or CALL 1-800-760-0526

QuickSplint®

Custom-fit Interim Bite Plane



Anweisungen für den Verschreibenden

Therapeutische Indikationen

- Schutz von Zähnen und Restaurationen vor Verletzung durch Bruxismus oder Pressen.
- Vorübergehende Linderung von Muskelverspannungen, Kopfschmerzen und Schmerzen im Zusammenhang mit Bruxismus oder Zähnepressen.
- Temporäre Behandlung von akuten Kiefergelenksverrenkungen und -muskelzerrungen mit Linderung der damit verbundenen Kopf- und sonstigen Schmerzen.

Haftungsausschluss

QuickSplint® ist möglicherweise nicht für alle Patienten geeignet. Dieses Produkt sollte bei Patienten mit Bewegungseinschränkungen oder Überbeweglichkeit im Kiefer mit Vorsicht angewendet werden.

Hinweis

QuickSplint ist in erster Linie während des Schlafens einzusetzen, um Schmerzen oder Schäden an Zähnen oder Restaurationen durch extreme Kraftereinwirkung auf die Zähne durch sogenanntes Mahlen, Knirschen oder Pressen – Bruxismus – zu verhindern. Sie könnten dem Patienten auch ein Tragen des QuickSplint während des Tages zur Schmerzlinderung oder zur Unterstützung der Heilung nach chirurgischen Eingriffen empfehlen, unter Ihrer Aufsicht.


Nur für die Anwendung an einem Patienten

Gegenanzeigen

Bekannte Allergien gegen Lexan121 oder Vinylpolysiloxan (VPS).

Warnhinweise

- QuickSplint darf nicht auf oder über geschädigten Zähnen angebracht werden.
- Ein ständiges Tragen (24 Stunden/Tag) von QuickSplint ist nicht zu empfehlen.
- Die 3 Halteöffnungen des QuickSplint müssen unbedingt mit Vinylpolysiloxan ausgefüllt sein, falls nicht, müssen Sie mit der Füllung und Anfertigung des QuickSplint nochmal von vorne beginnen.
- Achten Sie auf einen stabilen Sitz und guten Halt des QuickSplint, damit er während des Tragens nicht verrutscht oder verloren geht.

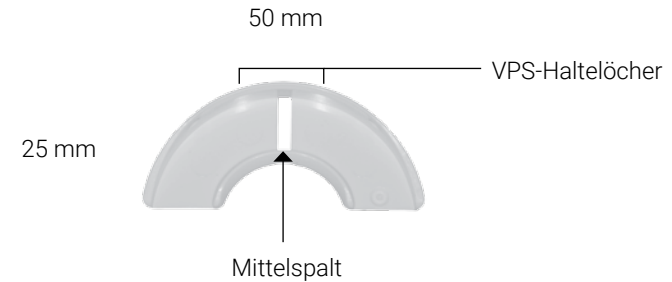

Überblick

QuickSplint wurde als schnelle, gebrauchsfertige, individuell angepasste Vorrichtung für die temporäre orale Therapie entwickelt. Die patentierten Merkmale des QuickSplint ermöglichen eine Anfertigung ohne Verwendung von Klebstoffen. Die beiden Überlauföffnungen im Rand der Schale und der Spalt in der Mitte des Bodens der Schale sorgen nach dem Füllen der Schale mit Vinylpolysiloxan (VPS) für einen festen Zusammenhalt zwischen Schale und VPS. Die gesamte Schale, der Mittelspalt und die Überlauföffnungen sollten für die bestmögliche Haftung und Anpassung an die Zähne des Patienten mit VPS überfüllt werden.

Schnell abbindendes Heavy Body VPS in Kartusche oder als Putty weist die beste Viskosität für einen sicheren Halt auf. [Diese Auswahl des Materials ist entscheidend für Ihre Erfahrungen mit dem QuickSplint.](#)

Für weitere Informationen zur Herstellung des QuickSplint sehen Sie sich das Demonstrationsvideo auf [QuickSplint.com](#) oder den [QuickSplint-YouTube-Kanal](#) an, wo allerlei Tipps und Tricks vorgestellt werden.


SIE BENÖTIGEN FOLGENDES

1. 7 cm³ bis 9 cm³ schnell abbindendes Heavy-Body-Vinylpolysiloxan (VPS) Abformmaterial als Putty oder in Kartusche, Automix-Pistole und Mischanleitung. Klebstoffe sind nicht erforderlich. Wenn Sie Putty verwenden, benötigen Sie 4 cm³ Katalysator und 4 cm³ Basis, die von Hand gemischt werden.
2. Schutzhandschuhe
3. Scharfe Klinge, etwa ein Skalpell, zum Nacharbeiten

WIR LIEFERN FOLGENDES

1. QuickSplint im eigenen Behälter
2. Anweisungen für den Patienten im Behälter

Nachbestellungen unter:
QuickSplint.com

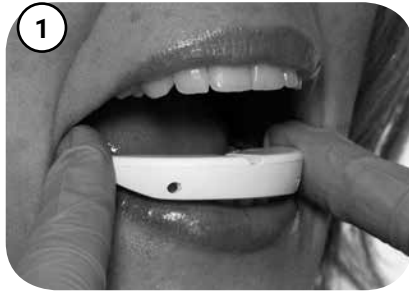

Schritt 1: Auswahl des Kieferbogens

Stellen Sie fest, in welchem Kieferbogen der Zahnkontakt mit dem QuickSplint größer ist, oder ob der Patient den Ober- oder Unterkiefer für das Tragen des QuickSplint vorzieht. Vergewissern Sie sich, dass der QuickSplint zum Kieferbogen des Patienten passt, indem Sie diesen in den Mund des Patienten einlegen und den Patienten den Mund zur Bestätigung schließen lassen.



Schritt 2: Füllen des Splint

Überfüllen Sie den QuickSplint gleichmäßig mit VPS. Die Schale sollte bis zum Überlaufen mit VPS gefüllt sein.



Schritt 3: Füllen des Mittelspalts

Drehen Sie die Schale um und füllen Sie den Mittelspalt mit VPS.



Schritt 4: Einsetzen des Splints

Setzen Sie den QuickSplint an den oberen oder unteren Zähnen ein und halten Sie ihn fest, während der Patient vollständig zubeißt. So wird die Abformung gegen den gegenüberliegenden Bogen vorgenommen. VPS wird aus dem QuickSplint überlaufen und Halteöffnungen und Zähne ausfüllen. Beim oberen Kieferbogen weisen Sie den Patienten an, das Material mit der Zunge langsam und vorsichtig gegen die Rückseite der Zähne und in den Gaumen- oder Zungenbereich zu drücken, um möglichst viel Halt zu erzielen.



Schritt 5: Splint abnehmen

Sobald das Vinylpolysiloxan abgebunden ist, nehmen Sie den QuickSplint vorsichtig aus dem Mund.



Schritt 6: Nacharbeiten des Splint

Entfernen Sie überschüssiges Material mit einer scharfen Klinge. Führen Sie die Klinge an der Schale entlang. Setzen Sie den QuickSplint wieder auf die Zähne des Patienten und prüfen Sie Passform und Haftung an den Zähnen, um ein Verrutschen während des Tragens zu vermeiden. Der QuickSplint ist nun einsatzbereit!



Reinigungsanleitung

1. Vermeiden Sie harte Bürsten oder andere Reinigungsmethoden, die Risse oder sonstige Verformungen des VPS-Materials.
2. Täglich in warmem Wasser waschen, gründlich abspülen und an der Luft trocknen lassen.
3. In regelmäßigen Abständen durch zehnmütiges Einweichen in einer Mischung aus Mundwasser und Wasser zu gleichen Teilen desinfizieren.



Gebrauchsfertiger Splint

QuickSplint®

DIAGNOSE
TREAT
PROTECT
HEAL

Custom-fit Interim Bite Plane



To Reorder go to:
QuickSplint.com
or CALL 1-800-760-0526

Para realizar nuevos pedidos, visite:

Pour de nouvelles commandes, consultez :

Per Riordinare andate su:

Ga om te bestellen naar:

Nachbestellungen unter:

Para encomendar novamente, vá a:

QuickSplint.com